



Panasonic®

使用说明书

面部护理器

(家用) 超声波射频美容仪

型号 EH-XRF1

目录

安全注意事项	2	使用后	14
使用须知	6	常见问题	15
部件名称	7	故障排除	17
模式与护理部位	8	内置式充电电池的取出方法	19
准备	8	更换部件	20
使用	10	规格	20
各模式的移动方法	13		

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并妥善保管，以备将来参考。

安全注意事项

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及财产损失的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

	危险	表示极有可能导致重伤或死亡的潜在危险。
	警告	表示可能会导致重伤或死亡的潜在危险。
	注意	表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

以下标志用于对需要遵循的说明的种类进行分类和描述。

	此标志用于提醒用户注意禁止采取的操作步骤。
	此标志用于提醒用户注意为了安全操作本产品而必须遵循的操作步骤。

说明书内插图与实物可能有差异。

危险

► 预防意外事故

请勿在以下电子医疗器械和家用电子治疗仪器的附近使用本产品。



- 心脏起搏器等体内植入式医疗器械
- 人工心肺等生命维持医疗器械
- 心电图、点滴控制器等穿戴式医疗器械
- 否则可能会导致电子医疗器械和家用电子治疗仪器发生误动作，进而引发事故或身体不适。

警告

► 为防止出现皮肤及身体不适

下述人士请勿使用本产品：

- 心脏病患者
- 面部神经损伤人士
- 糖尿病患者
- 出血性疾病、血友病患者等血液异常人士
- 高血压人士
- 正在进行牙科治疗的人士
- 视网膜剥落或曾经罹患视网膜剥落的人士
- 高度近视人士（-6D以上）
- 因骨折、整形等而在面部接受过金属、硅胶、塑料等植入手术的人士
- 幼儿及成长期儿童、无法清晰表达自身意愿的人士
- 因交通事故等而留有头部及眼科后遗症的人士
- 接受过眼部手术的人士（接受过LASIK手术的人士请向主治医师咨询）
- 否则可能会引发事故或身体不适，甚至可能会导致失明。



警告

下述人士请勿使用本产品：



- 过敏性体质人士
 - 患有皮肤病及过敏性皮肤炎的人士
 - 敏感性肌肤人士
- 否则可能会导致肌肤、身体异常。



怀孕、月经期间或刚生育的人不应使用本产品。
- 否则可能因激素水平失调而引起肌肤问题。



热感迟钝及皮肤不具感知能力人士严禁使用本产品。
- 否则可能会导致灼伤、触电或受伤。

请勿在以下情况及部位使用本产品。



- 身体不适时
 - 饮酒及服药期间、感觉特别疲劳时
 - 皮肤上有伤口、湿疹及肿块时
 - 有皮炎、晒伤等皮肤疾病时
 - 当天脱毛部位
 - 接受过整形手术的部位
 - 额头（仅能在RF（射频）模式下使用）、嘴唇、眼球、上眼睑、耳朵、脖子
- 否则可能会引发肌肤或身体不适，甚至可能会导致失明。

以下人群请咨询医师后再使用本产品。



- 长期重症患者
 - 急性病患者
 - 热性病患者
 - 传染病患者
 - 恶性肿瘤患者
 - 在美容院、诊所等处接受过需要一定恢复时间的治疗，或最近2周内接受过会导致肌肤发生严重红肿治疗的人士
- 否则可能会引发事故或导致皮肤、身体不适。



肌肤或身体感觉到疼痛或异常时，请立即停止使用本产品。
- 否则可能会引发事故或导致皮肤、身体不适。



本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督，并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任。并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 否则可能导致意外的发生或受伤。



请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。
- 否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。

► 本产品



请勿在易燃物附近使用本产品。
• 酒精、汽油、稀释剂、喷雾剂、消光剂等
- 否则可能会导致火灾或受伤。



请勿投入火中或加热。
请勿在高温环境下充电、使用、放置本产品。
- 因本产品含有内置充电电池，如遇上述情况可能会导致发热、起火、爆炸。

警告

 请勿将本产品存放在儿童和婴幼儿的接触范围之内。此外，还请勿让他们接触或操作本产品。

- 否则可能会因为其意外吞入部件而引发事故和伤害。



 请勿自行改装或维修本产品。

- 否则可能导致火灾、触电或受伤。

→ 请联系客户咨询服务中心（更换电池等）。

 除废弃本产品以外，切勿进行拆解。

- 否则可能导致触电，受伤或火灾。

 电源线不能更换，如果电源线损坏，此电源适配器应废弃。

- 否则可能导致意外的发生或受伤。

► 如果发生异常或故障

如果发生异常和故障，请立即停止使用并拔下电源插头。

- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

 < 异常或故障情况 >

• 机身、适配器或电源线变形或异常变热

• 机身、适配器或电源线发出烧焦的气味

• 机身、适配器或电源线在使用或充电过程中发出异常声音

→ 请联系客户咨询服务中心。

► 电源

 请勿用湿手将适配器连接到家用电源插座中，或从家用电源插座中拔出适配器。

- 否则可能发生触电或受伤。



 请勿将机身或电源适配器浸入水中或用水清洗。

- 否则可能造成触电或火灾。

 请勿在浴室等湿气较重的地方使用或保存，请勿放置在容易沾水（如洗脸台上）的地方。

- 否则可能造成触电或火灾。

 当电源适配器损坏时，或者插头没有在家用电源插座上插紧时，切勿使用本产品。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。

 请勿损坏或改装电源线及电源插头，请勿用力弯曲、拉拔或扭曲电源线。

另外，请勿在电源线上面放置重物或挤压电源线。

- 否则可能发生触电或由于短路引发火灾。

 使用时，请勿超过家用电源插座或链接的额定值。

- 如果在一个电源插座上连接过多插头而使其超过额定值，可能会因过热而引起火灾。

 请勿使用除自带的电源适配器（见第7页）以外的其他设备对本产品进行充电。此外，请勿使用自带的电源适配器对其他产品充电。

- 否则可能导致烫伤或由于短路引发火灾。

 请务必使用 100-240 V~ 电压。

- 否则可能导致火灾或触电。

 请充分插入适配器或电源插头。

- 否则可能导致火灾或触电。

警告

进行清洁时，请务必从家用电源插座上拔出适配器。
- 否则可能导致触电或受伤。

请定期清洁电源插头和电源线插头，防止灰尘积聚。
- 否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。
→ 请断开适配器，然后用干布擦拭。

注意

► 电源

请勿让针或异物附着到电源插头及电源线插头上。
- 否则可能导致触电或因短路引发火灾。

请勿在存放时将电源线紧紧地缠绕在适配器上。
- 否则可能导致电源线断线，并可能发生触电或由于短路引发火灾。

拔出电源适配器或电源插头时，应握住适配器或电源线插头而不要仅握住电源线。
- 否则可能导致触电或受伤。

不充电时，请从家用电源插座上断开电源适配器。
- 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电，从而引发触电或火灾。

► 请注意以下事项

请勿让探头面和RF（射频）端子接触金属。
- 否则可能导致灼伤。

请避免本产品跌落或受到冲击。
- 否则可能导致受伤。

请勿在相同部位长时间使用本产品。
- 否则可能导致皮肤受伤、感染、发炎、出血、色素沉淀等问题，或导致症状恶化。

使用前，请检查探头面是否有裂纹、缺口、变形和其他损坏。
- 否则可能导致皮肤受伤。

仅用于面颊、脸部轮廓、额头（仅能在RF（射频）模式下使用）的修整（进行过敏性测试的手臂除外）。
- 否则可能导致皮肤受伤或炎症。



废弃本产品时拆下电池的处理

危险

此充电电池专用于此产品。请勿将其用于其它产品。

- 请勿对已从此产品上拆下的电池充电。
- 请勿对其加热或将其投入火中。
- 请勿敲击、拆解、改装或用指甲刮擦。
- 请勿用金属物体连接电池的正负极端子。
- 请勿将电池与项链和发夹等金属饰品放在一起携带或保存。
- 请勿在高温环境（如直射阳光下或其他热源附近）下使用或放置电池。
- 请勿撕掉电池外皮。
- 否则会导致过热、起火或爆炸。

警告



取出充电电池后，请勿将其放在儿童和婴儿可触及的范围内。

- 不慎吞服电池会造成人身伤害。
- 如发生此种情况，应立即就医。



如电解液泄漏并接触到眼睛，请勿揉眼，用自来水等清水彻底冲洗。

- 否则可能导致眼部受伤。
- 如发生此种情况，应立即就医。

注意



如电解液泄漏并接触到皮肤或衣物，用自来水等清水冲洗。

- 否则可能导致炎症。

使用须知

关于使用频率

1天1次合计12分钟内※

※ RF・ULTRASONIC（射频・超声波）模式 + RF（射频）模式

请至少间隔1天，每周最多使用3次。

- 过度使用反而无益于肌肤。

关于肌肤

使用前，请务必使用专用凝胶或代替它的护肤品进行过敏测试（皮肤测试）。（见第8页）

- 这项简单测试可预先检查肌肤问题。

请在素颜（卸妆、洁面后）状态下使用本产品。

使用的同时请观察皮肤状况。

- 当肌肤出现问题时，请停止使用并咨询医生。
- 肌肤问题也可能由压力、体质、内脏疾病、护肤品等原因所导致，请咨询专业医生。

关于温感RF（射频）强度

温感RF（射频）强度越高，则探头面温度越高。

请根据皮肤情况及喜好选择。

- 初次使用或肌肤感觉不适时，建议调至强度“低”后再使用。

关于传感器

通过传感器检测探头面是否正确地贴合肌肤。

- 防过度护理传感器：持续按压探头面。
- 接触传感器：提示探头面未与肌肤贴合。（见第12页）


关于饰品

首饰类（项链、耳环等）会有卷入机器中的可能性，因此使用本产品时请摘下首饰。

- 以下符号表示需要用特定的可拆卸式供电装置将电器连接到供电装置。供参考的供电装置型号标识在该符号旁边。




部件名称

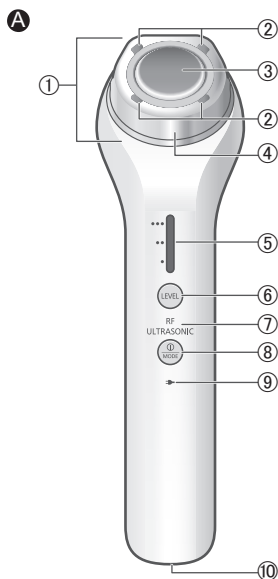

A 机身


- ① 传导头
- ② RF（射频）端子
- ③ ULTRASONIC（超声波）探头·温热部位
- ④ 外框
- ⑤ 温热RF（射频）强度指示灯（蓝色）

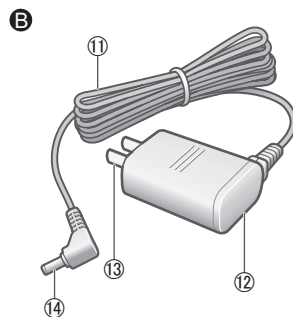

D



- ⑥ 温热RF（射频）强度选择开关
※ 调节RF（射频）强度的同时，探头的表面温度也会随之变化。
- ⑦ 模式指示灯（蓝色）
 - RF（射频）
 - ULTRASONIC（超声波）
- ⑧ 电源 / 模式选择开关
- ⑨ 充电指示灯·状态指示灯 ()
- ⑩ 电源线插孔

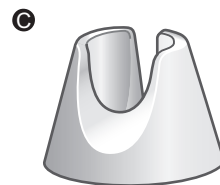

B 电源适配器（RE6-37）

- ⑪ 电源线
- ⑫ 适配器
- ⑬ 电源插头
- ⑭ 电源线插头

C 放置架

附属品

D 专用凝胶

模式与护理部位

请根据护理部位，选择相应模式。

模式	RF • ULTRASONIC (射频 • 超声波) 模式	RF (射频) 模式
护理部位	 面部轮廓线、面颊、 口周护理 • 请勿用于额头。	 额头护理
功能	射频 + 超声波 + 振动	射频
使用时间	10分钟	2分钟


准备

进行过敏测试（皮肤测试）

请将专用凝胶（或替代专用凝胶使用的护肤品）与本产品组合使用进行适应性检测，以判断自己的肌肤是否适合使用本产品。

为了防止出现肌肤问题，请务必进行测试。

• 必须对所使用的每一种护肤品都进行测试。

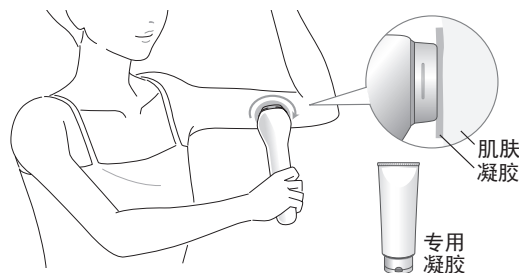

- 1 用肥皂洗净将进行过敏测试的部位（手臂内侧），并用毛巾等擦干
- 2 涂抹专用凝胶（或护肤品）
 - 在与传导头大小相当的区域上薄薄地涂抹一层凝胶。
- 3 打开电源开关，将传导头按压在涂抹部位
 - ① 打开电源开关
 - ② 预热完成后，将传导头面压向肌肤，以画圈的方式慢慢移动传导头（约10秒）（见第11~13页）
 - 传导头会振动。
 - ③ 使传导头暂时离开肌肤，然后再次在肌肤上移动约10秒
 - 结束后，让涂抹凝胶的部位自然晾干。

4 等待48小时

- 请勿打湿或搓揉涂抹部位。

如果在48小时内出现肌肤问题

请停止使用专用凝胶（或护肤品）。

充电

1 连接电源适配器

- ① 将电源线插头插入电源线插孔
 - ② 将机身放置于放置架上
 - ③ 将适配器插入家用电源插座
- 确认  亮灯（红色）。
（大约2小时过后，电量完全充满）
 -  熄灭

2 充电完毕后，将适配器从家用电源插座拔出，将电源线插头从机身拔出


（为了保证安全并节省能源）

- 即使充电时间超过2小时，也不会对产品造成损害。

想确认充电是否完成时

将电源线插头从机身拔出，然后重新插入。

- 充电完成时，则  亮灯，约5秒后熄灯。

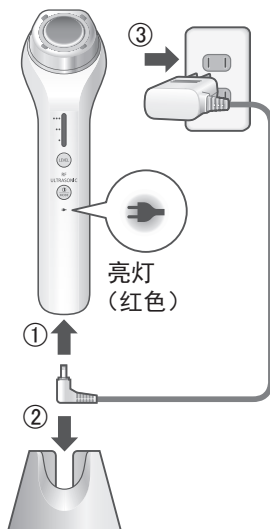

以下情况时，请充电：

- 电池电量较低时， 会闪烁（1秒1次）。
电池电量用尽时，会有声音提示。
请充电。

哔哔，
哔哔，
哔——

- 1次完全充电可使用约3次[※]。

※ 使用“RF·ULTRASONIC（射频·超声波）模式+RF（射频）模式”时。

但是，根据使用环境不同，使用时间可能会缩短。

► 提示

- 首次充电或半年以上未使用时，充电时间可能会发生变化，或出现一开始的数分钟内  不亮灯的情况。
（继续充电则会亮灯）
- 推荐的充电温度范围为15℃～35℃。如果环境温度过低或过高，则电池可能无法正常工作，同时还可能无法充电。
- 如果充电中或者使用中对收音机或其它设备造成干扰，请变更使用场所。

使用

请在素颜（卸妆、洁面后）状态下使用本产品。

- 推荐的使用温度范围为 15℃ 以上。超出推荐的温度范围使用时，可能会出现无法加温的情况。

1 按下 接通电源，选择模式

- 每次按下开关都会切换模式。（选中的模式指示灯会闪烁：蓝色）
- 请根据护理部位，选择相应模式。（见第8页）

RF • ULTRASONIC

（射频 • 超声波）
模式



RF（射频）
模式




关闭



哔


- 每次接通电源时，从 RF • ULTRASONIC（射频 • 超声波）模式开始启动。
- 在连接电源适配器的状态下无法接通电源。
- 请务必先安装外框再使用产品。

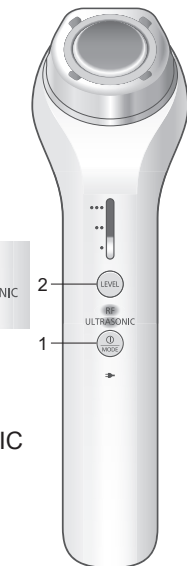

示例：
RF • ULTRASONIC
（射频 • 超声波）
模式

2 按下 选择温感RF（射频）强度（开始预热）

- 每次按下开关都会切换强度。（选中的强度指示灯会闪烁：蓝色）
- 温感RF（射频）强度越高，则超声波探头温度越高。

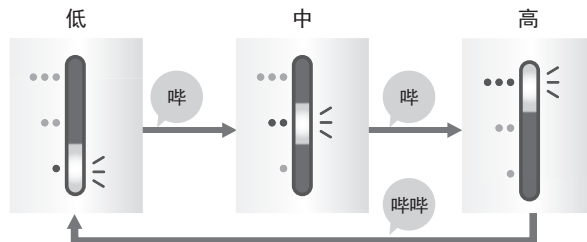

关于记忆功能

本产品将记忆上次使用时选择的强度，并按照相同的设置启动。

长时间不使用产品或电池电量用尽时，记忆会被清除。

3 预热时涂抹专用凝胶

• 推荐使用易于传导射频和超声波的专用凝胶。

1. 取适量（约3 g）护肤品于手心
2. 轻柔地涂抹到护理部位（部位）



此外，也可使用日常护肤品

- 为保证RF（射频）及ULTRASONIC（超声波）传导至肌肤，请一定要使用专用凝胶或护肤品。
- 请使用能确保机身滑动顺畅的护肤品。
→ 油分过多的护肤品可能会导致RF（射频）及ULTRASONIC（超声波）难以传导。



- 当使用过程中出现难以滑动的情況时，请添加护肤品，以确保不会让肌肤承受负担。

4 预热完成（约1分钟后）

接通电源后经过约1分钟，预热完成。（闪烁→亮灯）

哔

低强度时



亮灯

中强度时



亮灯

高强度时



亮灯

► 提示


- 闪烁状态下，也可直接使用。将传导头按压在肌肤上，则指示灯变为亮灯状态。
- 如果传导头未按压在肌肤上，则15秒后会发出提醒的声音，约1分钟后会自动切断电源。

哔——

哔哔，
哔哔

预热完成后切换强度时

每次按下  都会切换强度。

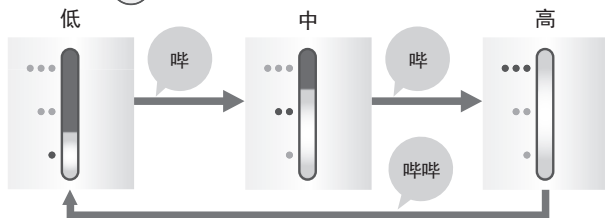


- 请一边观察肌肤状态，一边选择强度。

5 预热完成后，贴合肌肤移动

按压方法

(关于各个模式的动作方式，请参考第13页。)

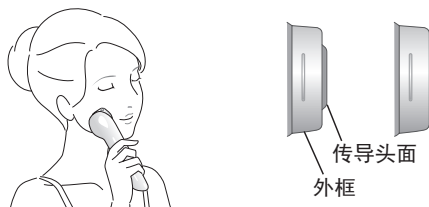

- 请确保传导头面与外框整体紧密贴合在肌肤上。
- 按压时，请控制按压力度，确保探头面与外框大致处于同一高度。传导头会振动*。
- ※ RF（射频）模式下则不会振动
- 如果没有充分按压，则传导头不会振动，无法获得RF（射频）及ULTRASONIC（超声波）效果。

► 提示

- 当传导头振动时，会发出声音（咔哒咔哒声），这并非异常。

► 洗去凝胶



- 洗去凝胶后，请使用日常的基础护肤品进行护理。
- 当使用日常的护肤品而非专用凝胶时，无需冲洗。

听到“哔哔，哔哔”声，随后振动停止

则是提示出现了以下任意一种情况，请重新正确地按压传导头面。

防过度护理传感器

持续按压探头面（约15秒）

接触传感器

探头面未与肌肤贴合（约15秒）

如果持续保持以上状态，
则电源会自动切断。
(约1分钟后)

哔哔，
哔哔，
哔——

哔哔，
哔哔



各模式结束时，将自动切断电源。

- 如需中途变更模式或切断电源，请按 。（见第10页）

各模式的移动方法


RF・ULTRASONIC（射频・超声波）模式（约10分钟）



护理部位

面部轮廓线 ←→ 口周～太阳穴 约8分钟

自下而上提拉脸颊般的移动（重复①～⑫）

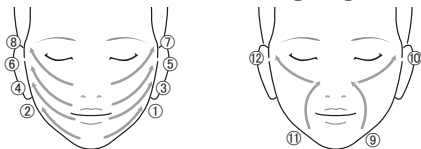

咻咻咻※

每1个箭头约5秒

※ 自动关闭电源前2分钟提示

口周 约2分钟 自动关闭电源 咻—

将口周沿着法令纹向上提拉般的移动（重复⑬～⑱）



每一个箭头约5秒


RF（射频）模式（约2分钟）



护理部位

额头 约2分钟 自动关闭电源 咻—

向上提拉般的移动（重复①～⑥）

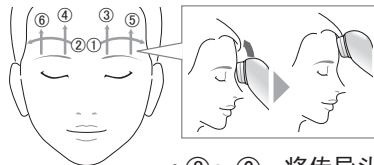

每一个箭头约5秒

- ③～⑥，将传导头的上部顶在眉毛上边，开始移动。

► 注意


- 当使用过程中出现难以滑动的情况时，请添加凝胶，以确保不会让肌肤承受负担。

使用后

- 使用后，请务必清洁机身与外框。
- 请确认电源已切断。

1 拆下外框

- 当凝胶附着在外框上导致难以拆卸时，请先将凝胶擦拭干净，然后再拆下外框。

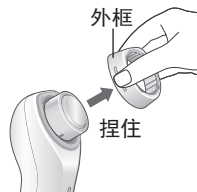


2 清洁保养

用纸巾等擦去凝胶



当凝胶进入缝隙中时，使用纸巾或棉签等擦拭干净

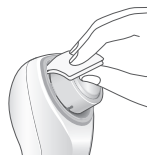

如果感觉脏污


用布蘸上肥皂水，拧干后擦拭

14

► 注意

- 不可水洗。
- 请勿使用酒精、除光液、洗剂（洗手液类）等。（否则可能导致产品故障、部件破裂或变色等）
- 请将附着的凝胶完全清除。（否则可能会因干燥而板结）

3 安装外框

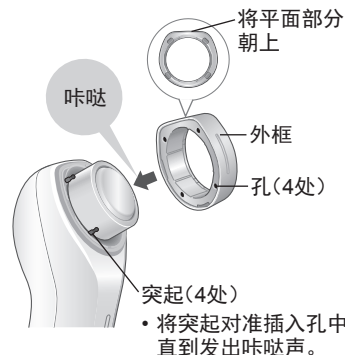

4 存放



常见问题



	提问	回答
RF（射频）、 ULTRASONIC （超声波）	什么是RF（射频）、ULTRASONIC（超声波）？	▶ RF（射频）：Radio Frequency 因其高频率也被称为高周波。 ULTRASONIC（超声波）：20 000 Hz 以上、人耳听不的声音。
	无法判断超声波有没有发射*。 ※ 使用RF・ULTRASONIC（射频・超声波）模式时 ▶	超声波是以1秒为间隔发射、停止，不断重复，但即使接触肌肤也感觉不到。 请通过以下方法确认。 1 在探头面上滴几滴水 - 让探头面保持水平。 - 由于凝胶难以进行确认，所以推荐用水。 - 请勿让水滴在探头面以外的地方。 2 接通电源，选择RF・ULTRASONIC（射频・超声波）模式 3 用手指轻轻按住探头面 （请控制按压力度，确保探头面与外框大致处于同一高度） 4 确认 正常情况下，水滴会振动。 （以约1秒为间隔，反复振动）   

提问		回答
关于使用	是否可用于手部以及身体？	▶ 本产品为面部专用产品，请仅用于面部美容。
	一天可使用几次？	▶ 一天仅可使用1次，不超过12分钟 [※] 。 ※ 使用RF・ULTRASONIC（射频・超声波）模式时请至少间隔1天，每周最多使用3次。 • 过度使用可能对肌肤造成负担。
护肤品	为什么要涂抹凝胶或护肤品？	▶ 为了将RF（射频）及ULTRASONIC（超声波）传导至肌肤。 如果探头面与肌肤之间有空气，RF（射频）及ULTRASONIC（超声波）将无法传导至肌肤。
	用市面上销售的其他凝胶或乳液等代替也可以吗？	▶ 推荐使用专用凝胶，不过也可使用美容液及乳液、凝胶状护肤品。 （见第8页）
	使用后应该使用何种基础护肤品？	▶ 请根据使用后的肌肤状态，使用日常的护肤品进行护理。
电池	电池的寿命大约为多久？	▶ 3年左右（保修期为1年）。 • 若完全充电后的使用次数仍然很少，说明电池已达到寿命极限。 （电池寿命主要取决于使用和存放方式）
	电池能够更换吗？	▶ 请联系客户咨询服务中心。 （如果自己更换，可能会造成故障）
	如果每次使用时都充电，会影响电池寿命吗？	▶ 本产品使用的是锂离子电池，这样做不会影响电池寿命。

提问		回答
发生以下问题时	如果凝胶让肌肤刺痛或肌肤出现问题怎么办？	▶ 在肌肤状态恢复前，请勿使用。（请咨询专业医生） • 可能是肌肤敏感。 • 也可能因健康状况、压力、体质、内脏疾病而导致肌肤问题。
	感到牙痛怎么办？	▶ 可能是发生龅齿的牙齿刺痛。 ▶ 在龅齿治愈前，请勿使用。（请咨询专业医生）

故障排除

发生以下问题时		请确认以下内容
电源	按下  后依然不工作	▶ • 是否已充电？（见第9页） ▶ • 电源适配器是否已拔出？（见第10页）
	即便已充过电，但产品也只能使用几分钟	▶ • 购买后是否已经过了3年以上？ ▶ → 电池达到寿命极限。请联系客户咨询服务中心。（用户不可自行更换，否则可能导致产品故障）

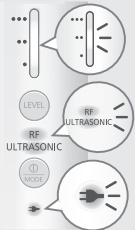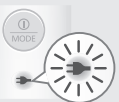发生以下问题时		请确认以下内容	
指示灯	 使用中指示灯闪烁（1次/秒），然后产品停止工作	▶	- 机身内部保护功能生效，异常停机。 →请暂时切断电源，然后再次接通电源。如果反复发生此类问题，请联系客户咨询服务中心。
	 使用中熄灯	▶	- 模式使用结束后，会自动切断电源。 - 预热完成后，如果传导头未按压在肌肤上，则约1分钟后会自动切断电源。 - 传感器生效。请确认按压在肌肤上的方法是否正确。（见第12~13页） - 电池耗尽。请充电。
	 充电时，不亮灯或熄灯	▶	- 充电完成则熄灯。（见第9页） - 电源适配器及电源线插头是否已充分插入？
	 充电时指示灯闪烁（2次/秒）	▶	- 充电异常。是否在推荐充电温度范围（15℃~35℃）内充电？ →当反复发生此类问题，请联系客户咨询服务中心。
温度	机身发热	▶	机身在使用或充电时会发热，这并非异常。
振动	RF（射频）模式时不振动	▶	RF（射频）模式时是不会振动的。

如果按照以上方法还不能解决，请联系客户咨询服务中心。


内置式充电电池的取出方法

本产品内置有充电电池，在消费者决定废弃本产品前，请务必将电池从产品中取出。

如有官方指定的电池处理场所，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

仅在废弃产品时才可使用图示方法，切勿使用此方法进行维修。如果自行拆解本产品，可能会引起功能故障。

- 取出电池之前，请将本产品断电。然后，打开电源开关保持产品一直动作，直到电池电量完全耗尽。
 - 鼓励消费者在决定废弃本产品前，事先征求经销商或松下电器授权的维修中心的意见，尽量延长本产品的使用寿命。
 - 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电池时，鼓励消费者将本产品送往松下电器授权的维修中心，由维修中心对电池进行分解和回收。
 - 电池务必废弃于政府规定的地方或回收处理单位。
 - 在拆解本产品之前，先将电源适配器插头拔下。
 - 启动电源，然后保持电源打开状态直至电池完全放电。
- 按右图所示①～④的顺序拆开本产品，卸下电池。
- 分解过程中切勿将电池短路，切勿让取出后的电池⊕⊖极端子短路，在端子部贴上胶布进行绝缘。

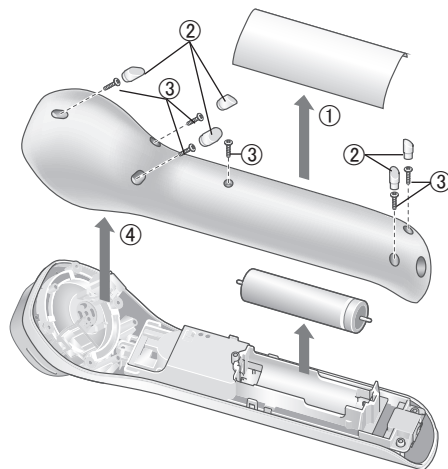

环境保护与资源回收

本产品使用锂电池。

如果您所在的国家有相关规定，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

更换部件

更换部件在经销商或松下电器授权的维修中心有售。

专用凝胶	EH-4R01
------	---------

规格

产品名称	面部护理器 (超声波射频美容仪)
产品型号	EH-XRF1
电源适配器 额定输入	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 180 mA
电源适配器 额定输出	4.8 V= 1.25 A
充电时间	约 2 小时
原产地	中国
生产日期	见商品上刻印
执行标准	GB4706.1, GB4706.15, GB4343.1, GB17625.1, Q/SXWBMJ 16

本产品仅适合家庭使用。

Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修(无偿修理), 从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修; 保修时, 请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意:

- a. 本保修证遗失后不再补发, 请妥善保管。
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国内有有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
2. 自购入之日起在以下期间内, 在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 辅助装置和专用凝胶 有偿提供
- 整机 (上述部件除外) 2年内无偿

3. 属下列情况之一者, 即使在保修期内, 也不能以保修对待, 但是可以实行收费修理:

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的;
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损(如: 掉落等)而造成损坏的;
 - c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的;
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的;
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的;
 - f. 因不可抗力因素(如雷电、地震、火灾、水灾等)造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合, 不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称:	面部护理器 (超声波射频美容仪)	产地:	中国
商品型号:	EH-XRF1	制造编号:	

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据, 请勿自行撕下

商品型号:	EH-XRF1	制造编号:	保修结算 4
商品型号:	EH-XRF1	制造编号:	保修结算 3
商品型号:	EH-XRF1	制造编号:	保修结算 2
商品型号:	EH-XRF1	制造编号:	保修结算 1
商品型号:	EH-XRF1	制造编号:	促销员留存

保修证管理编码印刷处:

[销售记录] 此处所登信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。

销售店
(盖章)

销售日期: 发票号码:
顾客姓名: 联系电话: 邮 编:
顾客地址:
销售店名称: 销售店电话: 邮 编:
销售店地址:

[维修记录]

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮 编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮 编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

维修店名称: 联系电话: 送修日:
维修店地址: 邮 编:
故障内容: 故障原因:
维修内容:
维修员签字: 交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善保管。
Panasonic客户咨询服务中心: 4008-811-315
Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn> 松下家电(中国)有限公司

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	
金属部件	×	○	○	○	○	○	
电气回路组件	×	○	○	○	○	○	
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○	
电源适配器	×	○	○	○	○	○	
玻璃、陶瓷	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。							



此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 (PWAPBLGZ)
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

地 址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
电话 (Tel): (020)84770333
传真 (Fax): (020)84773033
邮政编码 (Post Code): 511495
原产地: 中国

售后服务单位: 松下家电(中国)有限公司
客户咨询服务中心: 4008-811-315
官方网站: <http://panasonic.cn>

© CN

© Panasonic Corporation 2018

中国印刷
Printed in China
EH9700XRF11405 S0918-0
发行: 2018年9月