

保修证管理编码印刷处

本保修证内容如有变更恕不另行通知

[销售记录] 未完整记录以下信息将可能无法进行保修

销售日期: 发票号码: 销售店
(盖章)

顾客姓名: 联系电话:

顾客地址: 邮 编:

销售店名称: 销售店电话:

销售店地址: 邮 编:

[维修记录]

服务店名称: 联系电话: 送修日:

服务店地址: 邮 编:

故障内容: 故障原因:

维修内容:

维修员签字: 交验日期:

服务店名称: 联系电话: 送修日:

服务店地址: 邮 编:

故障内容: 故障原因:

维修内容:

维修员签字: 交验日期:

服务店名称: 联系电话: 送修日:

服务店地址: 邮 编:

故障内容: 故障原因:

维修内容:

维修员签字: 交验日期:

Panasonic客户咨询服务中心:

400-810-0781;800-810-0781(固定电话)

Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

松下电器(中国)有限公司

剪
切
线



Panasonic®


手提按摩棒 滚轮式
Reach Easy Rolling Massager

使用说明书
Operating Instructions

型号 EV2510
Model No.

目录

- 安全注意事项 1 ~ 4
- 各部名称 5
- 使用方法 6
- 按摩方法 7 ~ 8
- 保养及保管 8
- 规格 8

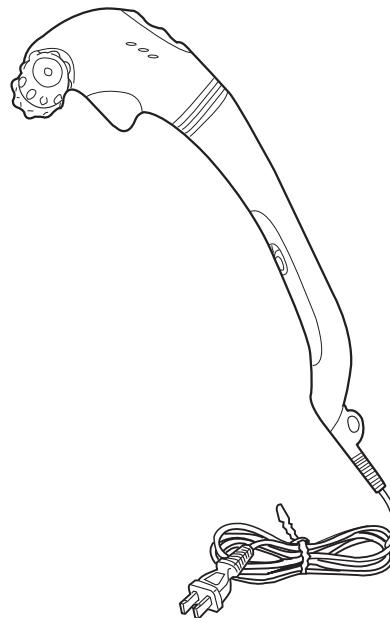

- 感谢您购买本公司产品。
- 使用之前请您务必仔细阅读本使用说明书。
- 请您务必妥善保管本使用说明书。

安全注意事项

Panasonic

※使用之前，请仔细阅读本“安全注意事项”，以便
正确使用。

※请按照本注意事项正确使用本产品，以防止您和他人
造成低温烫伤和损失。

请务必遵守本安全注意事项。

⚠ 警告：预想可能会致人死亡或负重伤的内容。

⚠ 注意：预想可能使人受伤及发生财物、损害的内容。

图例



“○”符号告知禁止的行为。图中或旁边画有具体的
禁止内容（如左图表示禁止分解）。



“! ”符号告知强制的行为或指示的内容。

※请将本说明书妥善保管。

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；

b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机2年内无偿

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；

b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；

c. 不经Panasonic认定服务店维修人员拆动造成损坏的；

d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；

e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；

f. 因不可抗力因素（如雷击、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：手提按摩棒 产地：中国北京

商品型号：EV2510 制造编号：

[保修回执] 以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：EV2510 制造编号： 保修结算4

商品型号：EV2510 制造编号： 保修结算3

商品型号：EV2510 制造编号： 保修结算2

商品型号：EV2510 制造编号： 保修结算1

商品型号：EV2510 制造编号： 促销员留存

⚠ 警 告

- 凡正在接受医生治疗或有下列情况者必须经医生同意后使用，否则有可能引起事故或产生不良后果。



务必遵守

- (1)心脏病患者
- (2)正在使用心律调整器等体内植入型医疗电子仪器者
- (3)恶性肿瘤患者
- (4)月经期或妊娠者
- (5)背骨异常弯曲者
- (6)曾经接受过治疗或患病部位
- (7)软骨病患者（骨质疏松者）
- (8)患有急性病者
- (9)有必要静养的人或身体状况显著不佳者
- (10)脚部有严重血液循环障碍者
- (11)因病引发高烧症状者
- (12)上述以外的身体感觉异常者

- 请务必使用交流220V电源。
否则有可能引发火灾或触电。



禁止

- 请勿让小孩使用，不要置于婴幼儿可拿取到的地方。
- 请勿让不能表达自己意志者或自己不能操作者使用。
否则有可能引起事故或造成伤害。

北京松下电工有限公司

地址：北京经济技术开发区同济北路1号
邮编：100176 电话：(010)-67882437

BJMRERMEV2510-8

! 警 告



禁止



禁止分解

! 注 意



务必遵守

- 头部、肘部、膝盖等的骨部，面部、腹部或皮肤的柔软部位不得使用。
否则有可能受伤。
- 不得在被窝中使用。
否则有可能触电或受伤。
- 不得损伤、自行加工、无理弯曲或拉拽电源线。
否则有可能引发火灾或触电。
- 电源导线和电源插头损伤、插入口松弛时，不得使用。
否则有可能引发触电和短路。
- 如果电源导线损坏，必须由本公司或本公司授权的维修部门的专业人员来更换。
- 绝对不允许改造。自行分解或修理。
否则有可能引发火灾，导致异常动作、受伤。

保养及保管 · 规格

有如下效果

按 摩 面	使 用 方 法	与按摩师相当的手法	对身体的主要影响	使 用 部 位
滚动滚轮	用滚动滚轮轻轻滚动在按摩的各部位	轻擦法 	● 对缓解肌肉的疲乏、促进血液循环有效果。 ● 缓解肌肉的僵硬	脊背·腰·肩·脚掌的大范围部位
拳式突起	按在按摩部位。	按压法 	● 对肌肉组织起缓解酸痛的作用。	肩部的酸痛部位
波形表面	按在酸痛的部位并移动。	强擦法 	● 对促进局部血液循环有效果。	胳膊·脚


保 养

- 主机脏污时，可用含有肥皂水的布擦拭。（绝对不得使用稀释剂、汽油、酒精。）
- 对电源插头每年干擦一次。
(以防止绝缘劣化。)



保 管

- 不得放置在小孩可拿到的地方。
- 防止从高处落下或对主机施加蛮力。
- 不得置于高温、高湿或阳光直射的地方。
- 请务必切断电源，进行保管。
- 请勿将导线卷缠在主机上。
- 导线扭曲时，请将其捋直。

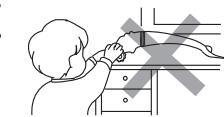

规 格

使 用 电 源	交 通 220V-240V	定 格 时 间	连 续
	50Hz-60Hz		约2mm (强档)
消 费 电 力	8W	头 部 振 幅	强 6300 (回/分)
			弱 5000 (回/分)
类 别	家 用 电动按摩器	振 动 频 度	长470x宽85x进宽180mm
一 般 名 称	手 提 按摩棒	尺 寸	约750g
执 行 标 准	GB4706.1-1998 GB4706.10-93	重 量	


按摩方法

如下的方法按摩更有效果。

■ 以酸痛部位为中心 . . .


1 [缓解肌肉的僵硬] 用滚动滚轮按摩。

- 用在有酸痛和疲惫感的部位。

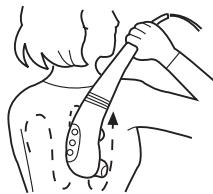

2 [缓解肌肉的酸痛感] 用拳式突起或波形表面

拳式突起

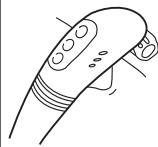

用力按在酸痛、
疲惫的中心部位。
(如果用两只手，
会感到强烈的振
动感)

波形表面



按在酸痛、疲惫的
部位并移动。

3 [按摩结束时] 用滚动滚轮进行按摩。

- 对按摩的部位再次揉搓。

建议

- 即使将电源开关置于「弱」档时，也请垫上毛巾等使用。



注意



禁止

- 不得用于按摩以外的用途。
否则有可能引发事故和故障。



禁止在有
水的地方使用

- 电源插头处，不得有针状物、灰尘、水。
否则有可能导致触电、短路、火灾。



拔出电源插头

- 不得在浴室等湿度高的场所使用。
否则有可能导致触电或引发故障。

- 不得浸在水中或被水附着。不得用湿手插拔插头。
否则有可能导致短路或触电。


- 拔出电源插头时，应捏住插头，将其拔出，切勿手持导线强拔插头。
否则有可能导致触电或短路而引发火灾。

- 不使用时，请务必将插头从插座上拔出。
否则灰尘或湿气会导致绝缘劣化，从而有可能导致漏电引发火灾。

- 检修时，请务必将电源插头从插座上拔出。
否则有可能导致触电或受伤。

- 停电时，请即刻将电源插头拔出。
否则，恢复供电时，有可能导致事故或受伤。


各部名称

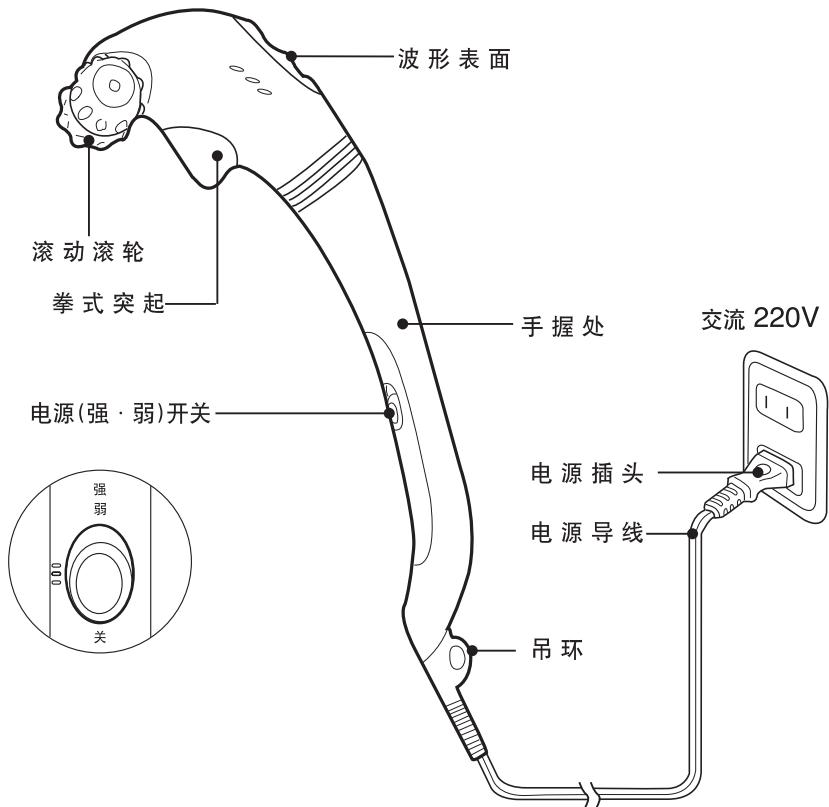

使用方法

- 使用时，有时会对电视机等造成干扰。应保持恰当距离使用。

1 插入 电源插头

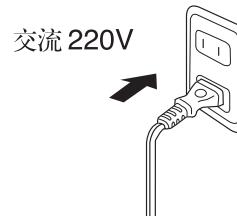


2 打开 电源开关

- 根据个人喜好，请分别选择「强」「弱」档。
- 尚未适应前，请选择用「弱」档。
- 务必请仔细阅读按摩方法（第7・8页）。

3 使用后，请将电源开关置于 「关」的状态

- 使用后，请务必将电源插头拔出。
- 手持移动时，请务必握在手握处。不得手持导线移动。

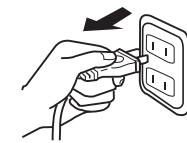

■ 请在如下部位使用。

背部



颈部




腰部



■ 如下部位也可使用。



胳膊

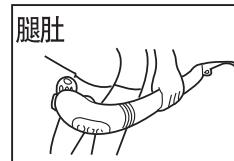

腿肚



脚底