

保修证管理编码印刷处

本保修证内容如有变更恕不另行通知

[销售记录] 未完整记录以下信息将无法进行保修



Sales record form with fields for date, invoice, customer name, address, and phone numbers.

[维修记录]

Repair record form with fields for service name, address, fault, and repair details.

Repair record form with fields for service name, address, fault, and repair details.

Repair record form with fields for service name, address, fault, and repair details.

Panasonic customer service center contact information.

松下电器(中国)有限公司



Panasonic logo

手提按摩棒 捶打式

Reach Easy Point percussion Massager


使用说明书

Operating Instructions

型号 EV2610 Model No.

目录

Table listing sections: Safety Precautions (1-4), Parts Name (5), Usage (6), Massage Method (7-8), Maintenance (9), Specifications (9).

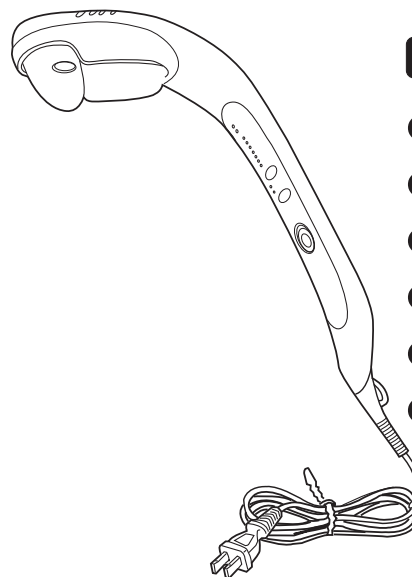

剪 切 线

- 感谢购买本公司产品。
使用之前请您务必仔细阅读本使用说明书。
请您务必妥善保管本使用说明书。

安全注意事项

※使用之前，请仔细阅读本“安全注意事项”，以便正确使用。
※请按照本注意事项正确使用本产品，以防您和他人遭受危害和损失。



请务必遵守本安全注意事项。



 **危险：**可能致人死亡或负重伤的、随时会导致危险发生的内容。

 **警告：**可能会致人死亡或负重伤的内容。

 **注意：**可能使人受伤及发生财物损害的内容。

图例

 “”符号告知禁止的行为。图中或旁边画有具体的禁止内容。（如左图表示禁止分解）

 “”符号告知强制的行为或指示的内容。（如左图表示务必遵守）

※请将本说明书妥善保管。

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。

以下两点需特别注意：

- a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
- b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可使用）。

2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

整机2年内无偿

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
- b.因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
- c.不经Panasonic认定服务店维修人员拆卸造成损坏的；
- d.不能出示本保修证及有效购机发票的；
- e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
- f.因不可抗力因素（如雷击、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

[商品信息]

商品名称：_____手提按摩棒_____产地：中国北京_____

商品型号：_____EV2610_____制造编号：_____

[保修回执]以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号： EV2610 制造编号： _____ 保修结算4

商品型号： EV2610 制造编号： _____ 保修结算3

商品型号： EV2610 制造编号： _____ 保修结算2

商品型号： EV2610 制造编号： _____ 保修结算1

商品型号： EV2610 制造编号： _____ 促销员留存

保养

- 主机脏污时，可用含有肥皂水的布擦拭。（绝对不得使用稀释剂、汽油、酒精。）
- 对电源插头每年干擦一次。（以防止绝缘劣化。）



保管

- 不得放置在小孩可拿取到的地方。
- 防止从高处落下或对主机施加蛮力。
- 不得置于高温、高湿或阳光直射的地方。
- 请务必切断电源，进行保管。
- 请勿将导线卷缠在主机上。
- 导线扭曲时，请将其捋直。



规格

使用电源	交流220V-240V	捶打频度	约270~1500次/分
	50Hz-60Hz		强 约118N(12kgf)
消费电力	18W	捶打强度	弱 约78N(8kgf)
类别	家用电动按摩器	自动程序时间 (一个循环柔和启动除外)	约90~100秒
一般名称	手提按摩棒	尺寸	高420x宽54x进宽247mm
		重量	约830g
执行标准	GB4706.1-1998 GB4706.10-93		

北京松下电气有限公司

地址：北京经济技术开发区同济北路1号

邮编：100176 电话：(010)-67882437

BJMREPMEV2610-6

危险



禁止

- 正在使用心律调整器等体内植入型医疗电子仪器的人不得使用。

否则有可能导致心律调整器等误动作。

警告



务必遵守

- 凡正在接受医生治疗或有下列情况者必须经医生同意后使用，否则有可能引起事故或产生不良后果。

- (1) 心脏病患者
- (2) 恶性肿瘤患者
- (3) 月经期或妊娠者
- (4) 背骨异常弯曲者
- (5) 曾经接受过治疗的部位或患病部位
- (6) 软骨病患者（骨质疏松者）
- (7) 患有急性病者
- (8) 有必要静养的人或身体状况显著不佳者
- (9) 脚部有严重血液循环障碍者
- (10) 因病引发高烧症状者
- (11) 上述以外的身体感觉异常者

- 请务必使用交流220V电源。

否则，会导致火灾、触电或发生故障。



禁止

- 请勿让小孩使用，不要置于婴幼儿可拿取到的地方。
- 请勿让不能表达自己意志者或自己不能操作者使用。

否则有可能引起事故或造成伤害。

警告

- 头部、肘部、膝盖等的骨部，面部、腹部或皮肤的柔软部位不得使用。否则有可能受伤。
- 不得在被窝中使用。否则有可能触电或受伤。
- 不得损伤、自行加工、无理弯曲或拉拽电源线。否则可能会引发火灾或触电。
- 电源导线和电源插头损伤、插入口松弛时，不得使用。
- 如果电源导线损坏，必须由本公司或本公司授权的维修部门的专业人员来更换。
- 绝对不允许改造。自行分解或修理。否则有可能引发火灾，导致异常动作、受伤。

禁止

禁止分解

注意

- 每次使用15分钟以内。或同一部位使用5分钟以内。否则有可能导致相反的效果或受伤。
- 无动作时或感到异常时，请务必终止使用。并立即拔出电源，务必委托检查、修理。否则有可能导致触电或引发火灾。
- 使用过程中，身体明显感到异常时，请立即终止使用，与医生商量。否则有可能导致身体不适或引发事故。

务必遵守

按摩方法

● 请注意您的头发不要被主机与振动头之间的缝隙夹住。

■ 请在下图所示部位使用。


肩部



颈部



腰部

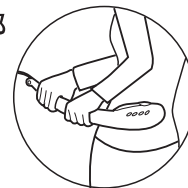


■ 下图所示部位也可使用。

胳膊




腿肚

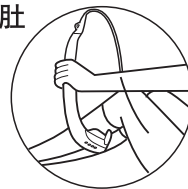

脚底



点捶打头的使用方法

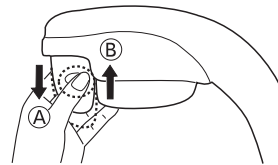

① 使捶打头伸长时，捏住左右突出按钮，按A箭头方向拉拽。（伸长距离：约10mm）

② 收回捶打头时，捏住左右突出按钮，按B箭头方向，使之收回。

● 请在切断电源后进行。


● 请不要过于用力拉拽。

振动头的恰当贴近方法


拳式锤头	对酸痛部位集中按摩时使用	按摩部位	颈·肩·脚底
掌式锤头	对广泛的部分按摩时使用		脊背·腰·肩
	肩	腰	

按摩方法


■ 捶打动作

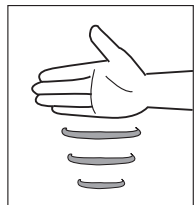


单掌敲击

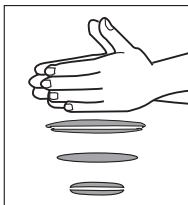


合掌敲击

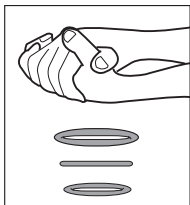


握拳捶打

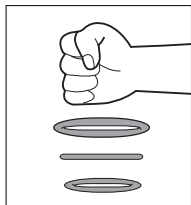


单拳捶打

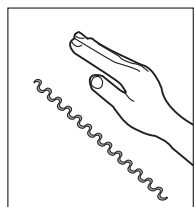

节奏振动

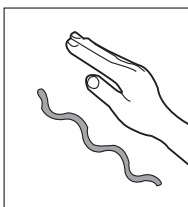

波浪振动

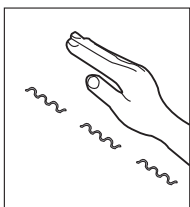

一般振动

建议

- 为了取得捶打效果，请轻轻贴近振动头。
- 对于敏感部位，请尽量避免直接与肌肤接触，如有疼痛感，请垫上干毛巾等再使用。
- 请不要对同一部位长时间的刺激。
- 长时间的连续使用，给予肌肉多余的不必要的刺激，有可能招致反效果。
- 不要垫在身体（脊背等）的下部使用。

⚠ 注意



禁止

- 不得用于按摩以外的用途。否则有可能会引发事故和故障。
- 主机和捶打头的缝隙处及通气孔等处不得有针状物或其他异物进入。
- 电源插头处，不得有针状物、灰尘、水。否则有可能导致触电、短路、火灾。




禁止在有水的地方使用

- 不得在浴室等湿度高的场所使用。否则有可能导致触电或引发故障。
- 不得浸在水中或被水附着。不得用湿手插拔插头。否则有可能导致短路或触电。



拔出电源插头


- 拔出电源插头时，应捏住插头，将其拔出，切勿手持导线强拔插头。否则有可能导致触电或短路而引发火灾。
- 不使用时，请务必将插头从插座上拔出。否则灰尘或湿气会导致绝缘劣化，从而有可能导致漏电引发火灾。
- 检修时，请务必将电源插头从插座上拔出。否则有可能导致触电或受伤。
- 停电时，请即刻将电源插头拔出。否则，恢复供电时，有可能导致事故或受伤。

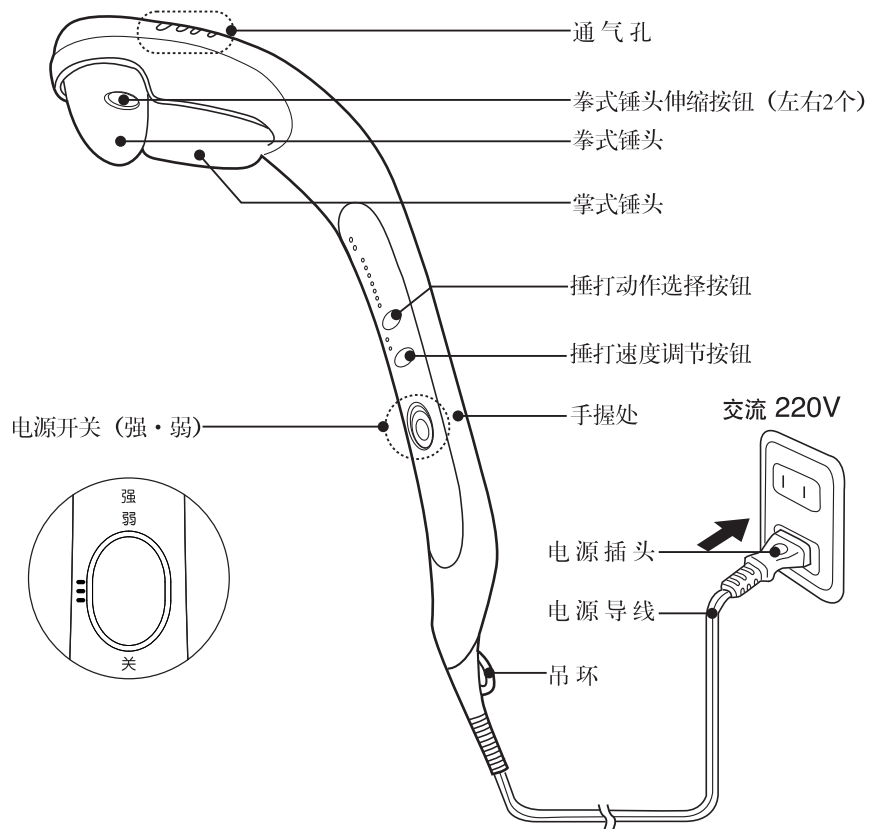

● 使用时，有时会对电视机等造成干扰。应保持适当距离使用。

1 打开电源、切换强度

将电源插头插入插座

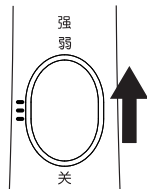


打开电源开关

- 根据个人喜好，请分别选择「强」、「弱」档
- 尚未适应前，请选择使用「弱」档
- 请务必仔细阅读按摩方法（第7·8页）

2 自选动作

用按钮进行选择

※打开电源时，为「肩程序」动作

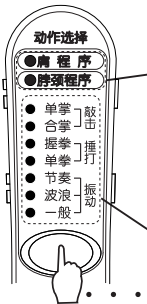


自动程序 各种单一动作的组合动作。

- 肩程序 ··· 以捶打为主对酸痛部位进行强刺激，可缓解深处的疼痛。
- 颈项程序 ··· 以振动为主对酸痛部位进行柔和刺激，对深处进行按摩。

自选动作 ······ 每按一次按钮，动作依次切换。

3 调节速度


按动按钮，进行调节

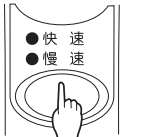

※打开电源时，为「慢」动作

4 切断电源

使用后，将电源开关置于「关」的状态

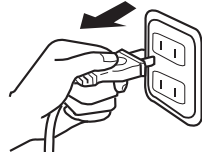

- 打开电源开关后，约15分钟自动停止。
- 使用后，请务必将电源插头拔出。
- 手持移动时，请务必握在手握处。（不得手持导线移动。）