

Panasonic®

使用说明书 (家用) 口腔冲洗器 型号 EW-NJ80

目录

安全注意事项	2	清洁	11
使用须知	5	更换喷嘴 (需要另外购买)	13
部件名称	6	故障排除	13
高速微粒水流	6	电池寿命	15
充电	7	内置式充电电池的取出及处理方法	15
使用方法	8	规格	16
使用小贴士	10		

感谢您购买松下电器产品。

在使用本产品前，请仔细阅读本说明书并妥善保管，以备将来参考。



产品真伪验证
官方配件商城
门店售后查询
产品使用教程

安全注意事项

为减少触电、受伤、火灾、死亡以及财产损失的危险，请务必遵守以下安全注意事项。

标志说明

以下标志用于对因无视标志说明和使用不当而导致的危险、伤害和财产损失的程度进行分类和描述。

	危险	表示极有可能导致重伤或死亡的潜在危险。
	警告	表示可能会导致重伤或死亡的潜在危险。
	注意	表示可能会导致轻伤或财产损失的危险。

说明书内插图与实物可能有差异。

警告

► 预防意外事故

请勿存放在婴幼儿的接触范围之内。

-  此外，还请勿让他们接触或操作本产品。
 - 否则可能因为不慎吸入活动部件而引发事故或受伤。

-  请妥善处理本产品的包装袋，使其远离婴幼儿。
 - 否则可能导致婴幼儿窒息等意外发生。

► 电源

-  请确保电源插头充分插入。
 - 否则可能会导致火灾或触电。

-  请勿用湿手将充电线连接到供电电源中，或从供电电源中拔出充电线。
 - 否则可能发生触电或受伤。

请勿将充电线浸入水中或用水清洗。

请勿在浴缸附近或在淋浴室内进行充电。

当充电线损坏时，或者充电线没有在供电电源上

-  插紧时，切勿使用本产品。
 - 请勿让电源线、Type-A插头或Type-C插头受到损伤，例如：损坏、改装、用力弯曲、拉拔、扭曲或在上放置重物等。
 - 否则可能造成触电或因短路引发火灾。

使用时，请勿超过供电电源的额定值。

-  如果在一个供电电源（如家用电源插座）上连接过多插头而使其超过额定值，可能会因过热而引发火灾。

警告

 请勿使用除附带的充电线以外的其他充电线对本产品进行充电。与充电线连接的供电电源，其额定电压应为 5.0 V $\overline{=}$ ，额定输出电流为 1.0 A 且同时满足安全特低电压（SELV）要求。若采用电源适配器供电，需另行购买，建议使用松下电源适配器 RU1-01。

→ 请联系客户咨询服务中心。

此外，请勿使用附带的充电线对其他产品充电。

- 否则可能导致烫伤或由于短路引发火灾。

请务必确保充电线连接的供电电源的工作电压符合其额定电压。

 请充分插入Type-A插头和Type-C插头。

- 否则可能导致触电或火灾。

▶ 如果发生异常或故障

如果发生异常或故障，请立即停止使用并断开电源。

- 在这种情况下使用本产品可能导致触电、受伤或火灾。

<异常或故障情况>

机身、充电线变形或异常变热。

机身、充电线发出烧焦的气味。

机身使用或充电过程中发出异常声音。

→ 请立即联系客户咨询服务中心。

▶ 本产品

 本产品含有内置充电电池。请勿将其投入火中或加热。请勿在高温条件下充电、使用或放置。
- 否则会导致过热、起火或爆炸。

 请勿自行改装或维修本产品。
- 否则可能导致火灾、触电或受伤。
→ 请联系客户咨询服务中心（更换电池等）。

 除废弃本产品之外，切勿进行拆解。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

 本产品不宜供肢体、感官或精神上有残疾者、或缺乏使用经验和知识者（包括儿童）使用，必须有监护者从旁监督，并对本产品的使用加以指导，且对使用者的安全能承担责任，并应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
请勿让未满6周岁的儿童使用本产品。
- 否则可能导致意外的发生或受伤。

▶ 清洁

 进行清洁时，请从供电电源上拔出充电线。
- 否则可能导致触电或受伤。

 定期清洁Type-A插头和Type-C插头，防止灰尘积聚。
- 否则可能因潮湿造成绝缘故障，从而引发火灾。

注意

▶ 防止牙齿和牙龈损伤

-  无操作能力的人士请勿使用本产品。
-  口腔敏感度较低的人士请勿使用本产品。
- 否则可能导致受伤或造成牙齿、牙龈损伤。

-  患有疑似牙周病，或担心口腔内有不适症状的人士在使用前应咨询牙科医生。
- 否则可能导致受伤或造成牙齿、牙龈损伤。

▶ 本产品

-  请勿用于口腔清洁之外的用途。
- 否则，水流喷向眼睛、鼻子、舌头或喉咙时，可能导致受伤。
-  请勿向水箱内注入温度超过 40 °C 的水。
- 否则可能导致灼伤。
-  请勿和家人或他人共用喷嘴。
- 否则可能引起感染或炎症。

▶ 注意事项

-  请避免本产品跌落或受到冲击。
- 否则可能导致受伤。
-  请勿让针头或杂物粘附到充电线的Type-A插头和Type-C插头及机身上的充电口上。
- 否则可能造成触电或因短路引发火灾。
-  充电前务必擦干充电口的水滴。
- 否则可能导致触电、受伤或火灾。

存放时，请勿将充电线紧紧地缠绕在供电电源上。

-  - 否则可能导致充电线断线，并可能发生触电或由于短路引发火灾。

拔出Type-A插头或Type-C插头时，请勿仅握住电源线拔出。

-  - 否则可能导致充电线断线，发生烫伤、触电，或由于短路而导致火灾。

不充电时，请从供电电源拔下充电线。

-  - 否则可能因绝缘性能下降而导致漏电，从而引发触电或火灾。

使用后，请清洁机身、水箱以及喷嘴，并使其风干。

-  - 否则，可能会因霉菌及细菌滋生而损害健康。

废弃本产品时拆下电池的处理

危险

- 请勿将其用于其它产品。
- 请勿对已从此产品上拆下的电池充电。
- 请勿对其加热或将其投入火中。
- 请勿敲击、拆解、改装或用指甲刮擦。
- 请勿用金属物体连接电池的正负极端子。
-  请勿将电池与项链和发夹等金属饰品放在一起携带或保存。
- 请勿在高温环境（如直射阳光下或其他热源附近）下使用或放置电池。
- 请勿撕掉电池外皮。
- 否则会导致过热、起火或爆炸。

警告

取出充电电池后，请勿将其放在儿童和婴儿可触及的范围内。



- 不慎吞服电池会给造成人身伤害。
如发生此种情况，应立即就医。

如电解液泄漏并接触到眼睛，请勿揉眼，用自来水等清水彻底冲洗。



- 否则可能导致眼部受伤。
→ 应立即就医。

注意

如电解液泄漏并接触到皮肤或衣物，用自来水等清水冲洗。




- 否则可能导致炎症。

使用须知


- 请将本产品与牙刷搭配使用。仅靠水流难以去除附着在齿面上的牙垢，因此必须用牙刷刷牙。建议在刷牙后利用水流冲洗口腔内部。
- 首次用于口腔清洗时，即使在牙龈健康的情况下，可能也会出现牙龈出血。这是牙龈初次受到这种程度的刺激所致。一般在使用1~2周之后会停止出血。若出现持续2周以上的牙龈出血，可能意味着牙龈出现异常状况（牙周疾病等）。这时，请停止使用本产品，并咨询牙科医生。
- 请勿将自来水或温水以外的物质（盐、漱口水、药剂等）放入水箱。否则可能造成故障。
- 请勿使用烘干机或暖风机烘干本产品。否则可能导致部件故障或变形。
- 使用后，请将本产品存放在低湿度场所。将本产品留在盥洗室内可能引发故障。
- 请根据本说明书，正确地为本产品充电。（见第7至8页“充电”。）
- 本产品所含电池只能由技术人员更换，用户不得自行更换。请联络客户咨询服务中心以获取维修详情。

部件名称


A 正面

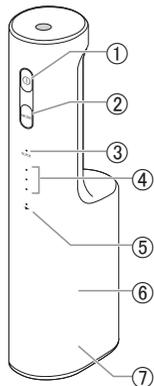


背面 (充电口盖打开时)

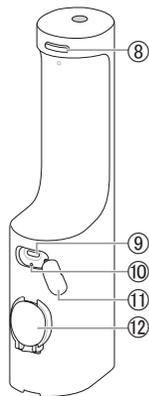

B

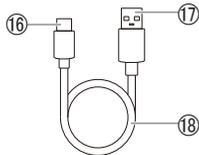

C

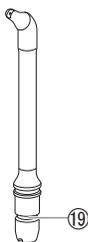

A 整机

- ① 电源开关(关/开)
- ② MODE(模式/档位)选择按钮
- ③ GUIDE(模式指示灯)(蓝灯)
- ④ 水压档位指示灯(蓝灯)
- ⑤ 充电状态指示灯(红灯)
- ⑥ 水箱(内部)
- ⑦ 机身
- ⑧ 喷嘴释放按钮
- ⑨ 充电口(Type-C)
- ⑩ 透气孔
- ⑪ 充电口盖
- ⑫ 水箱盖
- ⑬ 盖板
- ⑭ 底盖
- ⑮ 底盖释放按钮

B 充电线

- ⑬ Type-C插头(机身端)
- ⑭ Type-A插头(电源端)
- ⑮ 电源线

C 高速微粒水流喷嘴

- 喷嘴属于消耗品。
- ⑯ 喷嘴衔接口

温馨提示

机身内部(水箱等)可能会有水分,这是用于产品测试的蒸馏水残留所致,不会造成卫生问题。

高速微粒水流

指器具在正常运行状态下,喷出的含有纳米级别气泡的水流。

充电

本产品不含电源适配器（家电专用），需要另外购买。建议使用松下电源适配器RU1-01。如有需要请联系客户咨询服务中心。

1 打开机身背面的充电口盖。


- 如果充电口内或充电口盖上有水滴，请擦干并确认充电口内干燥后再进行充电。



2 将充电线的Type-C插头插入机身的充电口。

3 将充电线的Type-A插头连接至额定电压为 5.0V，额定输出电流为 1.0A 且同时满足安全特低电压（SELV）要求的供电电源。


- 检查Type-A插头端子的方向，握住Type-A插头，平直地插入和拔出。（如果偏斜或以错误方向插入可能会导致变形或故障）

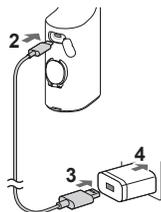

4 将供电电源连接至家用电源插座。

5 充电完成后，为了保证安全并节省能源，将充电线或连同供电电源从家用插座上拔下。

- 将Type-C插头从充电口内拔出，然后合上充电口盖。
- 约3小时可完全充满电。（充电时间可能因电池剩余电量而异。）
- 即使充电超过3小时，机身也不会发生故障。
- 不充电时，请盖好充电口盖，特别是在使用时或用水清洗机身时。

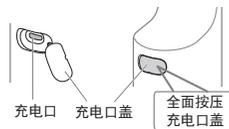

■ 充满电后的可用时长约20分钟*

（设定为连续水流模式3时）

※因环境温度和使用条件而异。

■ 关于充电提醒功能

如果剩余电量较少，在如下情况下（充电状态指示灯）会通过闪烁（1次/秒）进行提醒。

- 打开电源开关时
 - 按下MODE选择按钮
 - 关闭电源开关时（5秒后熄灭）
- 提醒充电时，请充电。

■ 充电中的指示灯显示

正在充电	充电完成时	充电异常时 (每秒2次)

(● : 点亮 / ○ : 熄灭)

(★ : 快速闪烁)

■ 充电完成的确认方法


如果在充电完成后拔插充电线，则 （充电状态指示灯）会亮起并大约在5秒钟后熄灭。

▶ 注意

- 超出推荐的充电环境温度范围（10℃～35℃）时，充电时间可能会延长，或是充电状态指示灯  会快速闪烁，甚至无法充电。
- 初次使用，或超过6个月未曾使用时，充电时间可能会有所不同，或充电状态指示灯  可能不会立即亮起，继续充电几分钟后即正常。
- 长时间不使用本产品时，电池性能可能会下降。因此，如果超过半年不使用时，请每隔半年将电池充满电一次。

使用方法


- 请确认充电口盖已合上。

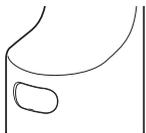

1 注水。


- ① 打开水箱盖。
- ② 将机身放平，往水箱中注水。
- ③ 将水箱盖盖紧。

（当水流高度达到满水位置，或达到满水位置后将水箱盖盖紧时，透气孔可能会有少量的水流出。）

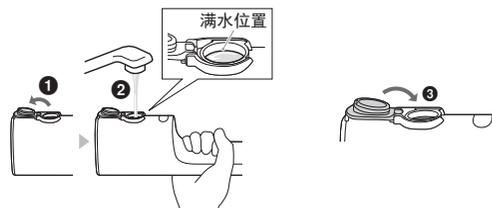

■ 如果水箱盖脱落

- ① 将水箱盖一侧的突起对准机身上的凹槽，然后一直按到底直到听到咔嗒声为止。
- ② 另一侧也同样插入。

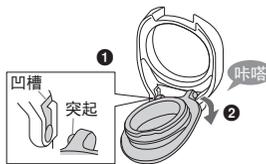

2 安装喷嘴。

充分安装喷嘴，直到听到“咔嗒”声为止。



3 按下MODE选择按钮，选择模式/档位。

• 关于模式与档位：

每按一下MODE选择按钮，模式会按以下顺序切换一次：
连续水流模式1→2→3→齿间引导模式1→2→3→连续水流模式1…。

• 关于水流的两种喷出模式：


连续水流和齿间引导。
连续水流模式是指适用于清洁口腔各个部位的水流。
齿间引导模式是指强水流与弱水流反复切换。
水流较强时，请将水流喷向牙齿之间的区域；
水流较弱时，请移动到下一个齿缝区域。

• 关于GUIDE (模式指示灯)：

连续水流模式时，GUIDE (模式指示灯)灭，
齿间引导模式时，GUIDE (模式指示灯)亮。

模式/档位	连续水流			齿间引导		
	1	2	3	1	2	3
GUIDE (模式指示灯)	○	○	○	●	●	●
水压档位 指示灯	(强)	○	○	●	○	○
	(中)	○	●	●	○	●
	(弱)	●	●	●	●	●

(点亮● 熄灭○)

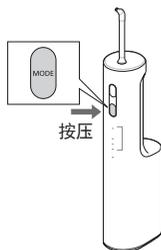

4 利用水流清洗口腔内部。

- 1 将喷嘴放入口中。
- 2 轻轻合上嘴巴。
- 3 打开电源开关。


• 使用过程中，可以按下MODE选择按钮切换模式。

■ 满水时的可用时长约80秒

(模式：连续水流3，将机身直立使用时)

- 如果使用时机身倾斜，则可用时长会缩短。
- 如果机身太过倾斜，则喷嘴不会喷水。

5 为防止水流飞溅，请先关闭电源开关，然后再从口中取出喷嘴。

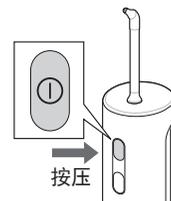

► 注意

- 务必使用干净的自来水或温水。（请勿将盐、漱口水、药剂等放入水箱。）
- 如果感觉水凉,请使用不超过 40 °C 的温水。
- 关闭水箱盖时,由于水箱内的空气会被排出,水可能会从透气孔中溅出,这并非异常。合上充电口盖之后,水不会溅入充电口。
- 初次使用时,请按下电源开关,在喷水状态下确认水压档位。（当您初次使用时或感觉过于刺激时,请从连续水流模式1或齿间引导模式1开始使用。）
- 使用环境温度在约 5 °C 或更低时,可能会发生无法运作的情况。
- 请勿将喷嘴的顶端贴在牙齿或牙龈上。
- 除了给机身排水以外,请勿在水箱内没有水的状态下打开电源开关。（否则可能造成故障。）

使用小贴士

请根据目的与希望得到清洁的部位,调整喷嘴的角度和移动方式。

要点

对于牙龈较为敏感的地方,请使用弱水压档位。

► 牙缝清洁

- 将水流喷向牙齿之间的区域。
- 从牙齿的前侧和后侧喷水。



► 牙周袋清洁

- 将水流对准牙齿和牙龈之间的缝隙。
- 慢慢地沿着牙龈移动水流。
- 清洁牙齿前后和臼齿背面。



► 牙龈护理

- 对牙龈给以刺激。




清洁

- 使用后水箱内会有水残留，所以请倒出剩余的水。
- 使用后，请进行清洁以保持干净。

1 将水箱内的水倒出，并将机身内剩余的水排空。

- ① 打开水箱盖，将水倒出。
 - 使用后，请务必每次都应将水倒出。
- ② 打开电源开关，将机身内剩余的水排空。
- ③ 等到不再喷水时，关闭电源开关。

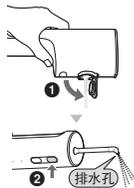

2 拆下喷嘴和底盖。

① 拆下喷嘴

喷嘴释放按钮

按压按钮的同时，
拔出喷嘴。



② 拆下底盖


→ 底盖的拆卸方法/安装方法

- 拆卸方法：① 按住底盖释放按钮（○）的同时
- ② 向上掀开拆卸。
- 安装方法：按照③、④的顺序安装



3 用水清洗机身（可整机清洗）、喷嘴、水箱内部。

- 用水清洗前，请先确认充电口盖已完全按入并盖紧。

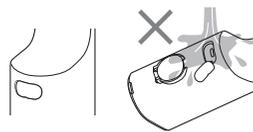


水洗

- 将水倒出时，请勿碰撞到洗脸台等。



4 晾干后存放。

- ① 用毛巾等擦干机身和喷嘴上的水滴。
（否则可能会导致故障或脏污。）
 - 请勿在潮湿状态下充电。
- ② 在阴凉通风处晾干后安装底盖。

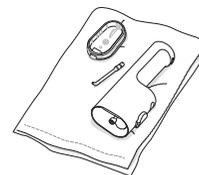

■ 如果底盖的橡胶圈脱落

将橡胶圈的平面部分朝向内侧，并将橡胶圈的凸起部位对准底盖上的凹槽，将橡胶圈安装到底盖上。




► 注意

- 请勿使用稀释剂、汽油、酒精等擦拭。
(否则可能导致产品故障或部件开裂、褪色。)
- 使用洗涤剂清洁时, 请使用餐具用的中性洗涤剂并充分漂洗, 确保没有洗涤剂残留。
- 请勿使用超过 50 °C 的热水清洗。

■ 出水状况不佳时

拆下底盖, 清除滤网上的附着物。
用柔软的刷子等轻轻刷洗干净。

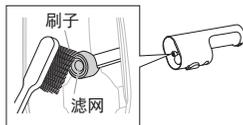

■ 感觉脏污时

从底盖上拆下盖板, 然后用水清洗。



→ 盖板的拆卸方法/安装方法

- 拆卸方法: 捏住突起部位并向上提



- 安装方法: 将底盖的凸起部分对准盖板的凹陷部位, 然后按入盖板, 直到发出“咔嚓”声。



■ 充电线


进行清洁时, 请从供电电源上拔出充电线。
请用干布擦拭干净。(不得水洗)



更换喷嘴（需要另外购买）


- 喷嘴属于消耗品。
- 更换的周期：约6个月（出于卫生的考虑）。
- 即使不满6个月，若喷嘴顶端变形或开裂，也应该进行更换。

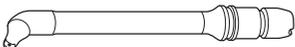

部件型号	替换喷嘴	
WEW0870	高速微粒水流喷嘴	

故障排除

故障	可能的原因和纠正措施
充电状态指示灯 不亮。	刚刚购买或是一段时间内未曾使用。 → 请继续充电，过一会儿就会点亮。 （见第8页）
充电时 快速闪烁（每秒2次）	充电线的Type-C插头没有充分插入机身的充电口，或充电线的Type-A插头没有充分插入供电电源。 → 请正确连接（见第7页），并确认  点亮。
充满电后也只能使用几分钟。	充电时的环境温度过低或过高。 → 请在推荐的充电环境温度范围（10℃~35℃）内进行充电。
	充电线的Type-C插头没有充分插入机身的充电口，或充电线的Type-A插头没有充分插入供电电源。 → 请正确连接（见第7页），并确认  点亮。
	电池寿命耗尽。（大约3年） → 请更换。（见第15页）

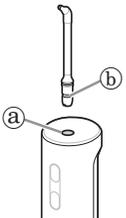故障		可能的原因和纠正措施	
使用时	出水状况不佳。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 喷嘴堵塞、变形、开裂。 →请更换。（见第13页） ▶ 滤网堵塞。 →请清除滤网上的附着物。（见第12页） 	
	不出水。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 机身太过倾斜。 →使用时请保持机身直立。（见第9页） 	
	喷嘴难以安装。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 可能需要一些时间才能把水吸上来。 →请往喷嘴安装口①加入适量的水，再次安装喷嘴，然后打开电源开关。 	

故障		可能的原因和纠正措施	
使用时	喷嘴无法安装到机身深处。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 可能是残留有破损的喷嘴碎片。 →请按住喷嘴释放按钮ⓐ，用棉签等将其取出。 	
	底盖处漏水。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 底盖的橡胶圈翘起或错位。 →请正确安装。（见第11页） 	
	熄灭前没有闪烁。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 电池寿命耗尽。（大约3年） →请更换。（见第15页） 	
	充电后仍不运行。	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 使用时的环境温度过低。 →请勿使本产品5°C或更低温度的环境中运作。 	

如果按照以上方法还不能解决，请联系客户咨询服务中心。

电池寿命

电池寿命约3年。如果充满电，可使用的次数仍出现大幅下降，则电池寿命可能已经用尽。（根据使用和存放条件，电池使用寿命可能有所差别。）

内置式充电电池的取出及处理方法

本产品内置有充电电池，在消费者决定废弃本产品前，请务必将电池从本产品中取出。


- 电池应安全地处置。
- 仅在废弃本产品时才可使用下文所示方法，切勿使用此方法进行维修。
- 如果自行拆解本产品，产品可能将不再防水或引起功能故障。
- 鼓励消费者在决定废弃本产品前，事先征求经销商或松下电器认定维修店的意见，尽量延长本产品的使用寿命。
- 当消费者决定废弃本产品又不想自行分解本产品取出电池时，鼓励消费者将本产品送往松下电器认定维修店，由维修店对电池进行分解和回收。

内置式充电电池的取出方法

取出电池之前，请将本产品断电。并打开电源开关保持产品一直运行，直到电池电量完全耗尽。

- 用螺丝批按照图示①～⑫的顺序拆开本产品，卸下电池。

- 分解过程中，切勿将电池短路，切勿让取出后的电池正极和负极端子短路，在端子部贴上胶布进行绝缘。
- 若您无法取出电池，请联系客户咨询服务中心。

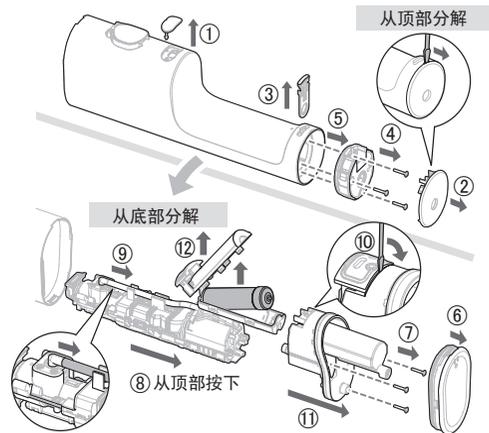

环境保护与资源回收

本产品使用锂电池。
如果您所在的国家有相关规定，请务必在指定处对旧电池进行统一处理。

规格

产品名称	口腔冲洗器
产品型号	EW-NJ80
充电时间	约3小时 (室温 10 °C~35 °C)
原产地	中国
生产日期	见水箱底盖上刻印
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

本产品仅适合家庭使用。

- 关于水箱底盖上的刻印
(按照①②的顺序打开底盖,
见水箱底盖上刻印)

XXXXXX —— 生产日期 (6位)

XXXXXXXXXX —— 产品序列号 (9位)



Panasonic

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理），从购入之日起开始实施。

1. 保修期内的商品只可在Panasonic认定维修店进行保修；保修时，请出示本保修证及购机发票。
以下两点需特别注意：

- a. 本保修证遗失后不再补发，请妥善保管。
 - b. 本保修证仅限于中华人民共和国国内有效(香港、澳门、台湾三地区暂不可使用)。
2. 自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

- 喷嘴、辅助装置 有偿提供
- 整机（上述部件除外） 2年内无偿

3. 属下列情况之一者，即使在保修期内，也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：

- a. 未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
 - b. 因不正确操作、电源不正常、破损（如：摔落等）而造成损坏的；
 - c. 不经Panasonic认定维修店维修人员拆卸造成损坏的；
 - d. 不能出示本保修证及有效购机发票的；
 - e. 保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
 - f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾等）造成损坏的。
4. 本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场合，不适用于经营性等使用。

【商品信息】

商品名称：口腔冲洗器 产地：中国
商品型号：EW-NJ80 制造编号：

【保修回执】以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

保修结算 4

商品型号：EW-NJ80 制造编号：

保修结算 3

商品型号：EW-NJ80 制造编号：

保修结算 2

商品型号：EW-NJ80 制造编号：

保修结算 1

商品型号：EW-NJ80 制造编号：

促销员留存

商品型号：EW-NJ80 制造编号：

保修证管理编码印刷处:

[销售记录: 此处所載信息仅于商品保修时作核对之用, 本公司不对该信息进行收集记录。]

销售日期:

发票号码:

销售店
(盖章)

顾客姓名:

联系电话:

顾客地址:

邮 编:

销售店名称:

销售店电话:

销售店地址:

邮 编:

[维修记录]

维修店名称:

联系电话:

送修日:

维修店地址:

邮 编:

故障内容:

故障原因:

维修内容:

维修员签字:

交验日期:

维修店名称:

联系电话:

送修日:

维修店地址:

邮 编:

故障内容:

故障原因:

维修内容:

维修员签字:

交验日期:

维修店名称:

联系电话:

送修日:

维修店地址:

邮 编:

故障内容:

故障原因:

维修内容:

维修员签字:

交验日期:

本保修证因含有消费者个人信息, 请妥善保管。

Panasonic客户咨询服务中心: 4008 - 811 - 315

Panasonic官方网站: <https://panasonic.cn>

松下家电(中国)有限公司

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质						备注
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
塑料部件	○	○	○	○	○	○	
金属部件	×	○	○	○	○	○	
电气回路组件	×	○	○	○	○	○	
电源线、 内部配线	×	○	○	○	○	○	
电源适配器	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件
玻璃、陶瓷	×	○	○	○	○	○	仅部分机型 含有该部件

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10 此标志标识产品的环保使用期限为10年，在环保使用期限内，产品中含有的有毒有害物质或元素在正常使用下不会发生外泄或突变，用户使用该产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。产品过了环保使用期要废弃时，必须按国家相关法律法规进行合理处理。

松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 (PWAPBLGZ)
Panasonic Wanbao Appliances Beauty and Living (Guangzhou) Co., Ltd.

地 址: 广州市番禺区钟村万宝基地万宝北街 33 号
(Address): 33, Wanbao North Street, Wanbao Industry Zone, Zhongcun,
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
电话 (Tel): (020)84770333
传真 (Fax): (020)84773033
邮政编码 (Post Code): 511495
原产地: 中国

售后服务单位: 松下家电(中国)有限公司
客户咨询服务中心: 4008 - 811 - 315
官方网站: <https://panasonic.cn>

中国印刷
Printed in China
EW9700NJ801405 S0923-0
发行: 2023 年 9 月

④ CN

© Panasonic Corporation 2023